

预染蛋白分子量标准（10-250kDa）

【产品简介】 ◇ 本公司生产的预染蛋白分子量标准（Prestained Color Protein Marker）包含了10kDa-250kDa 共11种纯化的预染蛋白质。

◇ 11条参考条带分别与蓝色、绿色和红色发光基团共价键连接，其中绿色蛋白条带代表分子量25kDa;红色蛋白条带代表分子量72kDa，其余条带均为蓝色。


【货 号】 P1203

【规 格】 250ul

【保存条件】 -20℃避光保存，一年有效

【使用方法】 本产品可直接上样使用，请勿加热、稀释或使用还原剂处理。常规上样量为每孔槽 3~5ul，即可清晰的展示电泳过程中蛋白分子量的变化。若使用较大或较厚的蛋白质电泳凝胶，建议依照情况增加上样体积。

【实验案例】

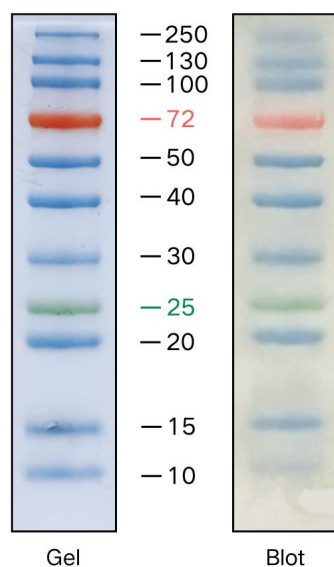

【注意事项】 ◆ 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

◆ 本产品仅限于科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。